

Termék adatlap

Quadroflex Advanced

Ez a 4 részes kezelőágy oly sokoldalú mint Ön! Az ágy felosztása ideális támaszt nyújt a térd, csípő és a váll ízületek megtámasztására. Az anatómiailag osztott fekvőfelület szinte az összes pozíció beállítását lehetővé teszi. Ideális abban az esetben ha fekvő pozícióból ülő pozícióba helyezi páciensét. A páciensnek nem kell lábait a fejrész felé mozgatni hogy ülő pozícióba kerüljön így a higiénia és a komfort érzet növekszik. Az ágy részeinek pozícionálása a 3 elektromotornak köszönhetően könnyen megoldható.

Sztandard felépítés

- 4 részes kezelőágy állítható fej, hát, ülő és láb szekcióval
- 3 motor a magasság a hát és az ülő pozíciónál
- Kartámasz a fejszekciónál
- Opcionális fold-down funkció a hátszekcióhoz
- Elektromos magasságállítás, perifériális lábkapcsolóval az ágy mind a négy részéhez vagy egy lábkapcsolóval
- Gymna Stability Profile (GSP)
- Fekvőfelület 40 mm vastag
- Légzőlyuk a fejszekción
- Központi kerékemelő 4 kerékkel
- Csúszásmentes lábak
- Fekvőfelület 11 színben választható
- Előkészítve a váll trakcióhoz

Rendelési adatok

125 091 Quadroflex Advanced perifériális kapcsolóval
125 092 Quadroflex Advanced lábkapcsolóval

Specifikációk

Hossz x szélesség:	± 202 x 67cm
Magasságállítás:	± 45 – 95 cm
Súly:	± 110 kg
Max. emelőkapacitás:	200 kg
Elektromotor:	6.000 N
Hálózati feszültség:	100 – 240 VAC, 50-60 Hz
Áramfelvétel:	1,5 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség ellenállóság:	IP 21
Klasszifikáció:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 CAN/CSA C22.2 No. 601.1 MDD 93/42/EEC



Opcionális

125 618 Fold-down szekciók (Advanced)

Tartozékok

122 405	Papírtekerstartó vázraszerelhető
337 018	Papírteker (12db)
107 819	Trakció rögzítő a vállakhoz
121 401	Nőgyógyászati lábtámasz
333 245	Trakciós készülék AutoTrac 460
121 434	Rögzítőkeret AutoTrac 450/460 készülékhez
332 915	Fekvőfelület lábvédő
xxx xxx	Terry-cloth takaró, nyúlós anyagból (9 féle színben rendelhető 'Style')




Gymna Stability Profile

Quadroflex Advanced



Opcionális fold-down szekciók

Funkcionalitás/méretetek

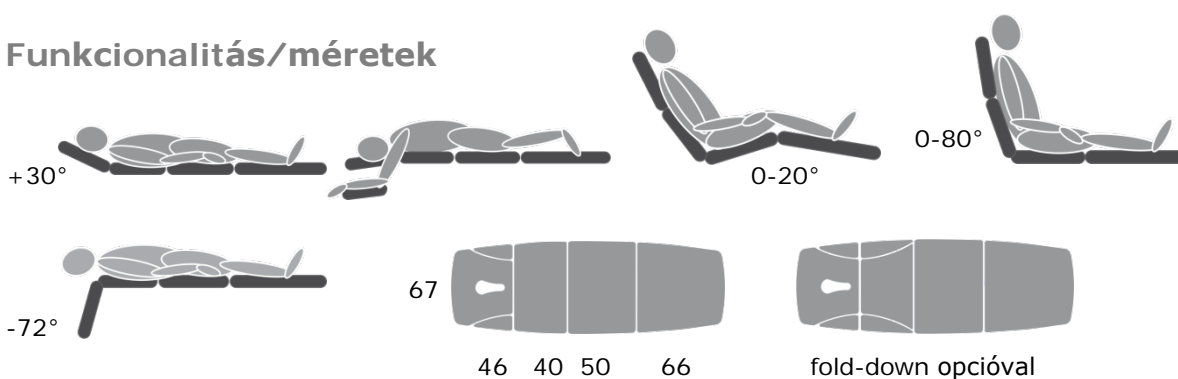

Fekvőfelület színek

Style



Fashion

