

Termék adatlap

Quadroflex Luxe

Ez a 4 részes kezelőágy olyan sokoldalú mint Ön. A páciens térdének, csípőjének és vállának tökéletes megtámasztásával a Quadroflex sokoldalú kezelőágy. A kezelőágy anatómián alapuló megosztása szinte minden pozíciót lehetővé tesz. Ideális a páciens fekvőpozícióból ülő helyzetbe történő mozgására. A páciensnek nem kell forgatni a lábait ha ülő helyzetbe akar kerülni így nő a komfortérzet és a higiénia. A Quadroflex kezelőágy pozícionálása a 3 motornak köszönhetően könnyen megoldható.

Sztandard felépítés

- 4 részes kezelőágy állítható fej, hát, ülő és láb résszel
- 3 motoros működés a hát és ülő részénél és a magasságállításnál
- Kartámaszok a fejrészen
- Opcionális fold-down támogatás a hátrészen
- Elektromotoros magasságállítás perifériális lábkapcsolóval. (4 oldalról működtethető)
- Gymna fekvőrész fűtés 2 fix hőfokkal és kézi állítási lehetőséggel
- Gymna Stability Profile (GSP)
- Fekvőfelület dupla béléssel és nagy sűrűségű alsó réteggel
- A Luxe kezelőágyak fekvőrésze nyereg öltéssel lett varva
- Légzőlyuk a fejrészen párnával
- Központi kerékemelő 4 kerékkel
- Csúszásmentes lábak
- Fekvőrész 11 féle színben
- Előkészítve a válltrakció támogatásához

Rendelési adatok

125 094 Quadroflex Luxe perifériális kapcsolóval és fekvőrész fűtéssel

Specifikációk

Hossz x szélesség:	± 202 x 67cm
Magasságállítás:	± 45 – 95 cm
Weight:	± 112 kg
Max. emelőkapacitás:	200 kg
Elektromotor:	6.000 N
Fekvőrész hőfoka:	35 or 38 °C
Hálózati feszültség:	100 – 240 VAC, 50-60 Hz
Áramfelvétel:	3,0 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség ellenállóság:	IP 21
Klasszifikáció:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 CAN/CSA C22.2 No. 601.1 MDD 93/42/EEC



Optional

125 622 Fold-down szekciók

Accessories

- 122 405 Papírtekercstartó a vázraszerelve
- 337 018 Papírtekercs (12db)
- 107 819 Trakció támogatás a vállakhoz
- 121 401 Nőgyógyászati lábtámasz
- 333 245 Trakciós készülék AutoTrac 460
- 121 434 Rögzítőkeret az AutoTrac 450/460 készülékhez
- 332 915 Fekvőfelület lábvédő
- xxx xxx Terry-cloth takaró, stretch anyagból (9 féle színben 'Style')



Gymna Stability Profile




Gymna fekvőrész fűtés

Quadroflex Luxe



Opcionális fold-down szekció

Funkcionalitás/méretetek

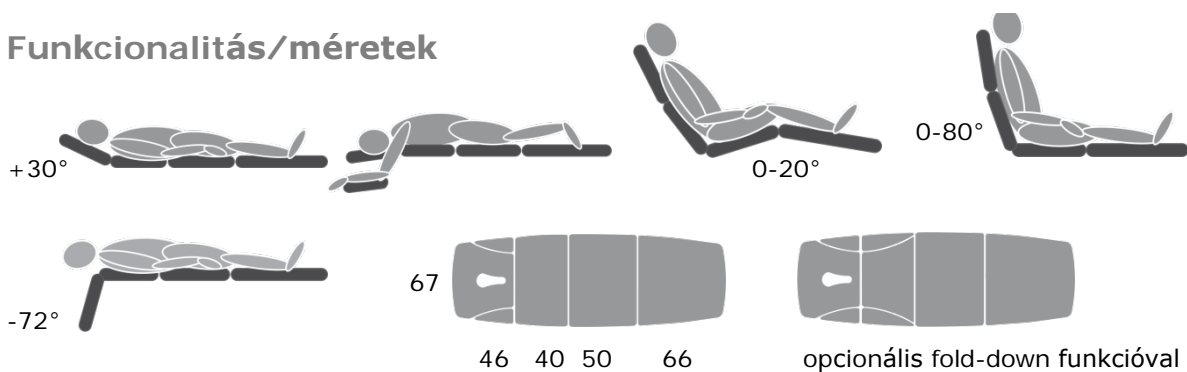

Fekvőrész színválaszték

Style



Fashion

