

Termék adatlap

Trioplus Luxe

3 részes stabil kezelőágy letisztult formával és funkcionalitással. Állítható fejrész, közepső és lábrész. Nagyon sokoldalú kezelőágy, használható ülő, fekvő helyzetben, lumbaris flexiora, és Trendelenburg pozícióban. Az ágy minősége garantálja a hosszú problémamentes használatot.

Sztandard felépítés

- 3 részes kezelőágy állítható fej, közepső és lábrésszel
- Minden rész gázrugóval állítható
- Elektromos magasságállítás perifériális lábkapcsolóval. (4 oldalról állítható)
- Gymna fekvőrész fűtés 2 fix hőfokkal és manuális állítási lehetőséggel
- Gymna Stability Profile (GSP)
- Fekvőfelület dupla béléssel és nagy sűrűségű alsó réteggel
- A Luxe kezelőágyak fekvőrésze nyereg öltéssel lett varva
- Légzőlyuk a fejrészen párnával
- Központi kerékemelő 4 kerékkel
- Csúszásmentes lábak
- Fekvőrész 11 féle színben
- Előkészítve a csípő trakció támogatására
- Előkészítve a válltrakció támogatására

Rendelési adatok

125 044 Trioplus Luxe perifériális kapcsolóval és fekvőrész fűtéssel

Specifikációk

Hossz x szélesség:	± 202 x 67cm
Magasságállítás:	± 45 – 95 cm
Súly:	± 101 kg
Max. emelőkapacitás:	200 kg
Elektromotor:	6.000 N
Fekvőrész hőfok:	35 or 38 °C
Hálózati feszültség:	100 – 240 VAC, 50-60 Hz
Áramfelvétel:	3,0 A
Inzulációs osztály:	II
Nedvesség ellenállóság:	IP 21
Classification:	I
Konformitás:	IEC/EN 60601-1 IEC/EN 60601-2 CAN/CSA C22.2 No. 601.1 MDD 93/42/EEC



Opcionális

125 602	Elektromosan állítható középrész
125 610	Motorizált fejrész (nem kombinálható a 125 602-es tétellel)
121 404	Tartó szet rögzítőszalaghoz
125 608	Fekvőrész 60 cm széles
125 609	Fekvőrész 80 cm széles

Tartozékok

122 405	Papírtekercstartó vázraszerelve
337 018	Papírtekercs (12db)
107 819	Trakció támogatása a csípő és vállrészhez
121 401	Nőgyógyászati lábtartó
333 245	Trakciós készülék AutoTrac 460
121 434	Rögzítőkeret a AutoTrac 450/460-as készülékhez
332 915	Fekvőrész lábvédő
xxx xxx	Terry-cloth takaró, stretch anyagból (9 féle színben 'Style')



Gymna Stability Profile





Gymna fekvőrész fűtés

Trioplus Luxe



Funkcionalitás/méretetek

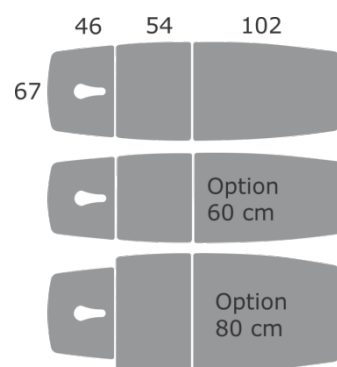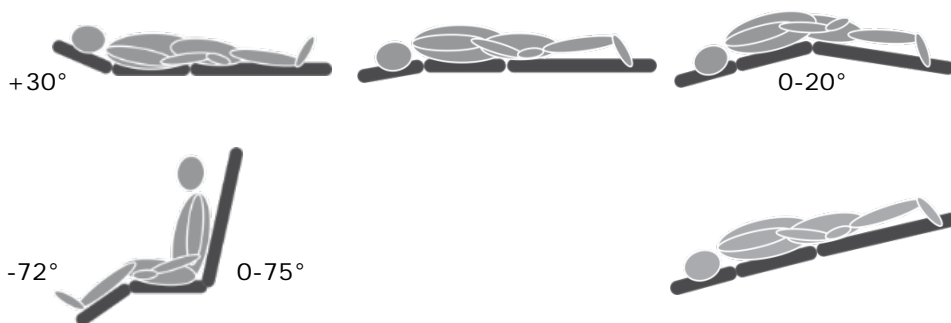

Fekvőrész színválaszték

Style



Fashion

